



# Kirkas näkymä



## EXACLEAR GC:itä

Kirkas vinyylipolysiloksaanimateriaali

Luottotuotteesi  
läpinäkyvään työskentelyyn

**GC**

# EXACLEAR GC:ltä


## Lisää läpinäkyvyyttä

EXACLEAR on innovatiivinen, kirkas silikonimateriaali, joka täyttää vaativien esteettisten töiden asettamat vaatimukset ja auttaa saavuttamaan upean lopputuloksen. Materiaalin täydellinen läpinäkyvyys tekee siitä erityisen tehokkaan vaihtoehdon hankaliin kliinisiin tilanteisiin.



Muovin injektioimista voi seurata visuaalisesti.

\*Ei GC:n rekisteröimä tavaramerkki

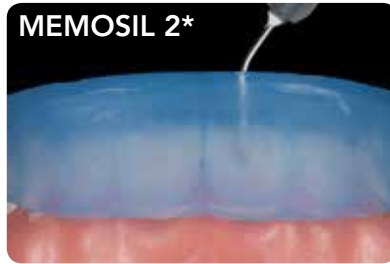

## Kristallin kirkkautta

**Korkea läpinäkyvyys** tarjoaa mahdollisuuden seurata materiaalin liikettä visuaalisesti ja valokovettaa työ tehokkaasti silikonin läpi.

Tämä lisää konversiota ja estää happi-inhibitiokerroksen syntymisen, mikä tekee viimeisestä **kiillotusvaiheesta helpomman**.



EXACLEAR-materiaalin läpinäkyvyys (äärimmäisenä oikealla) kilpailijoihin verrattuna.

## Ihanteellinen koostumus takaa työn onnistumisen

Juoksevuus ilman painetta



Ihanteellinen koostumus asettuu **helposti jäljennöslusikkaan**

Juoksevuus paineen alla



Juokseva koostumus **adaptoituu täydellisesti** ja toistaa **yksityiskohdat täsmällisesti**

Helppo porata



Kovettuttuaan **jäykkä ja luja** – materiaalia on helppo leikata ja siihen on helppo porata reikiä injektioimista varten

Ei repeydy



Riittävän **joustava**, jotta materiaali voidaan poistaa **ilman, että se murtuu tai muuttaa muotoaan**

## Koska nopeus on valttia

Vain **kaksi minuuttia** suussa, ja jäljennös on kovettunut ja voidaan poistaa.

Mallin päällä materiaalin kovettuminen vie **seitsemän minuuttia**.



2 min suussa



7 min suun ulkopuolella

# Tutustu injektioomuottiteknikkaan

## Suorat laminaatit vastaanotolla

Kun kliinisessä työssä käytetään EXACLEAR--materiaalia yhdessä injektoitavan yhdistelmämuovin, kuten G-ænial Universal Injectable -muovin kanssa, työt ovat yhtä kauniita kuin epäsuorat laminaatit, mutta valmistuvat nopeammin, edullisemmin ja vaativat **vähemmän invasiivisia toimenpiteitä**.

Koska EXACLEAR on täysin läpinäkyvää, työn **pienimmätkin yksityiskohdat** on helppo tarkistaa ja happi-inhibitiokerroksen synnyn voi estää, jolloin viimeinen kiillotusvaihe helpottuu. **G-ænial Universal Injectable** sopii tiksotrooppisen koostumuksensa, lujuutensa ja kiiltonsa ansiosta erittäin hyvin juuri tähän tekniikkaan.



1. Lähtötilanne



2. Täytä jäljennöslusikka EXACLEAR-materiaalilla ja ota vahatusta kipsimallista jäljennös



3. Poista kirkas silikoni lusikasta kovettumisen jälkeen



4. Poraa reikä silikoni-indeksiin muovin injektioimista varten



5. Eristä viereinen hammas, etsää kiille ja levitä sidosaine



6. Aseta silikoni-indeksi suuhun ja injektoi G-ænial Universal Injectable indeksiin poratusta reiästä



7. Valokoveta silikoni-indeksin läpi ja poista se sitten paikoiltaan



8. Poista muovin ylimäärät terällä



9. Lopputulos parin kiillotusvaiheen jälkeen

Kuvat: HLT A. Salehi, Ranska

## Kuluneen purennan korjaaminen vastaanotolla suorilla yhdistelmämuoveilla

Injektiovaluteknikka on ihanteellinen menetelmä myös kulumien korjaamiseen tai monimutkaisen morfologian jäljittelyyn. Koska EXACLEAR on täysin läpinäkyvää, injektion etenemistä voi seurata ja hallita samalla, kun hoitaa useaa hammasta kerralla. **G-ænial Universal Injectable** -materiaalin korkea taivutuslujuus ja kulutuksenkestävyys sopivat näihin taka-alueen tihin erinomaisesti.



1. Lähtötilanne



2. Täytä jäljennöslusikka EXACLEAR-materiaalilla ja ota mallin vahauksesta jäljennös



3. Tilanne injektiovalumenetelmän jälkeen

Kuvat: HLT A. Mak, Australia

# EXACLEAR GC:ltä

## Kristallin kirkkautta



### EXACLEAR

012792	EXACLEAR, 2x 48 ml patruuna, 6x sekoituskärki II (koko S)
800100	60 x sekoituskärki II (koko S)

## Luottotuotteesi hankalissa kliinisissä tilanteissa

### Injektiovalu- tekniikka

EXACLEAR-materiaalin injektioimista on helppo hallita



#### G-ænial Universal Injectable

Luja ja täydellisen tiksotrooppinen injektointava yhdistelmämuovi

### Kerrostus- tekniikka

EXACLEAR on helppo valokovettaa palatinaalisesti



#### Essentia

Erittäin esteettinen yhdistelmämuovimateriaali, yksinkertainen värijärjestelmä

### Kuituvahvisteisten retentiokaarien asettamiseen

Tehokas sidosaineen ja kuitujen valokovetus EXACLEAR-materiaalin läpi



#### everStickORTHO

Lasikuitulujite esteettisille oikomiskojeille

### Väliaikaiset kruunut ja sillat

EXACLEAR-materiaalin avulla kruunu- ja siltamateriaalin valokovettaminen onnistuu täydellisesti



#### TEMPSMART DC

Kaksoiskovetteinen materiaali väliaikaisille kruunuille ja silloille

#### GC EUROPE N.V.

Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info.gce@gc.dental  
<http://www.gceurope.com>

#### GC NORDIC AB

Finnish Branch  
Bertel Jungin aukio 5 (6. kerros)  
FIN-02600 Espoo  
Tel: +358 40 9000 757  
info.finland@gc.dental  
<http://finland.gceurope.com>  
<http://www.gceurope.com>

