



Luja perusta

everX Flow™  
GC:ltä

Katkokuituvahvisteinen  
juokseva yhdistelmämuovi  
dentiinin korvaamiseen

**GC**

# everX Flow GC:ltä

## Luja perusta


Tutustu katkokuituvahvisteiseen juoksevaan yhdistelmämuoviin **everX Flow**, joka on tarkoitettu **dentiinin korvaamiseen ja täytteiden vahvistamiseen**. Samalla tavoin kuin teräsvahvisteista betonia käytetään rakennustöissä, everX Flow -materiaalin lasikuidut vahvistavat hammastäytteitä ja **estävät niitä halkeilemasta**.

Koska everX Flow on helppokäyttöinen, uskomattoman luja ja saatavilla kahdessa eri värisävyssä, siitä tulee **uusi suosikkisi pilarin rakentamisessa ja kaikissa täytteissä, joissa tarvitaan lujaa perustaa**.



## Parempi murtolujuus takaa **kestävät** laajat täytteet

Useimpien yhdistelmämuovien ominaisuudet sopivat erinomaisesti kiilteen korvaamiseen, sillä ne kestävät kulutusta ja ovat hyvin esteettisiä. Ne eivät kuitenkaan pysty vastustamaan murtumia samalla tavoin kuin dentiini. everX Flow sen sijaan pystyy, sillä sen murtolujuus on erinomainen. **Materiaalissa on suuri määrä lujasti resiniinimatriisiin sitoutuneita lyhyitä kuituja, joiden ansiosta murtolujuus on lähellä dentiinin murtolujuutta**. Näin materiaali **vahvistaa tehokkaasti isoja taka-alueen täytteitä** tavallisen yhdistelmämuovin toimiessa kiillekerroksena.

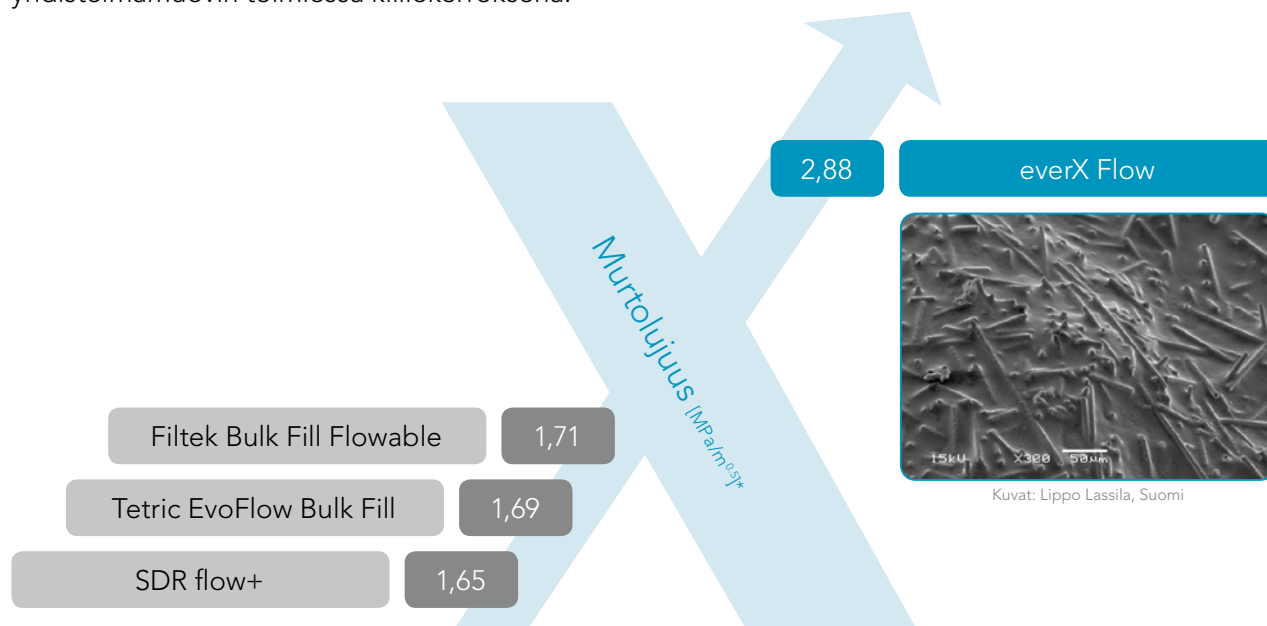

\* Lähde: GCC R&D – Talletettua tietoa.  
Testi suoritettu ASTM E399-90 (1997) -standardin mukaisesti.


# Täydellisen tiksotrooppinen everX Flow™ on helppo levittää ja mukautuu



Kuvat:  
Javier Tapia Guadix, Espanja

Ihanteellisen tiksotrooppisuutensa ansiosta everX Flow **mukautuu helposti kaikkiin preparaateihin ja auttaa lisäämään tiiviyttä.**

Koska materiaalin juoksevuus on hallittavissa, sitä voi levittää myös ylämolaareihin **ilman valumista.**

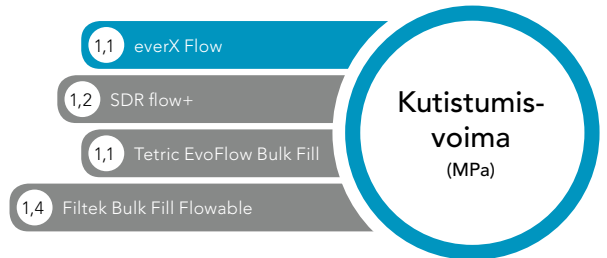

Lähde: GCC R&D – Talletettua tietoa.

## Kaksi värisävyä täyttää kaikki tarpeesi



**Bulk**

Kovetusvyvyys  
5,5 mm

Ihanteellinen **syviin taka-alueen kaviteetteihin**



**Dentin**

Kovetusvyvyys  
2,0 mm

Ihanteellinen **esteettisempiin täytteisiin ja pilarin rakentamiseen**

## Ihanteellinen isojen kaviteettien vahvistamiseen ja pitkäkestoisiin esteettisiin täytteisiin



Kaviteetin preparointi



everX Flow -materiaalin applikointi (Väri: Dentin)



Viimeinen kerros Essentia-materiaalilla (Väri: Universal)



Postoperatiivinen tilanne

Kuvat: Georg Benjamin, Saksa



Kaviteetin preparointi



everX Flow -materiaalin applikointi (Väri: Bulk)



Viimeinen kerros G-aenial Universal Injectable -materiaalilla (Väri: A3)



Postoperatiivinen tilanne

Kuvat: Lucile Dahhan, Ranska

# everX Flow GC:ltä

## Luja perusta



**Bulk-väri**  
syviin  
kaviteetteihin

**Dentin-  
väri**  
erittäin  
esteettisiin  
töihin



Preparoi kaviteetti



Jos kyseessä on luokan II kaviteetti,  
rakenna puuttuvat seinämät  
tavallisella yhdistelmämuovilla



Täytä kaviteetti everX Flow  
-materiaalilla



Lopputuloksena, kun työ on päällystetty  
tavallisella yhdistelmämuovilla

### everX Flow

012898	everX Flow, ruisku 2 ml (3,7 g) Bulk
012899	everX Flow, ruisku 2 ml (3,7 g) Dentin

## Tutustu myös



**G-Premio BOND**  
Universaali sidosaine



**G-aenial Universal Injectable**  
Erikoisluja injektoitava yhdistelmämuovi



**Essentia Universal**  
Universaali pastamainen  
yhdistelmämuovi

everX Flow, Essentia, G-Premio BOND ja G-aenial Universal Injectable ovat GC:n tavaramerkkejä.  
Filtek Bulk Fill Flowable, SDR flow+ ja Tetric EvoFlow Bulk Fill eivät ole GC:n tavaramerkkejä.

**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info.gce@gc.dental  
http://www.gceurope.com

**GC NORDIC AB**  
Finnish Branch  
Bertel Jungin aukio 5 (6. kerros)  
FIN-02600 Espoo  
Tel: +358 40 9000 757  
info.finland@gc.dental  
http://finland.gceurope.com  
http://www.gceurope.com

# GC